










1A-II **ELLER OR ODER OU**

L'application SalivaCODE est recommandée comme guide d'utilisation.

1A-I Si vous utilisez l'application SalivaCODE pour enregistrer l'échantillon salivaire avec un code QR: Suivez toutes les étapes de l'application la première fois que vous prélevez l'échantillon salivaire.

1A-II Si vous utilisez l'étiquette en papier de la notice d'emballage: Remplissez votre nom et votre numéro d'identification national avec un stylo, ATTENDEZ QUE L'ÉCHANTILLON SALIVAIRE SOIT COLLECTÉ, puis collez l'étiquette en papier sur le SalivaPOD ou le tube à essai.

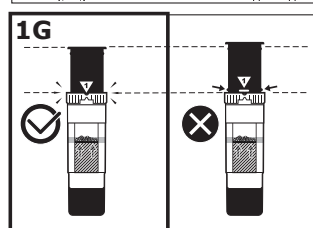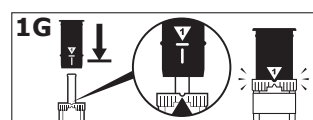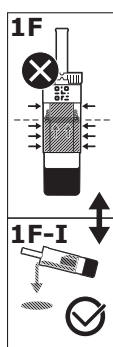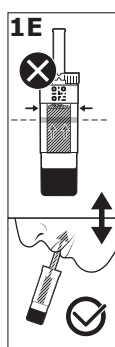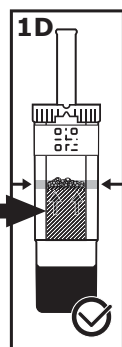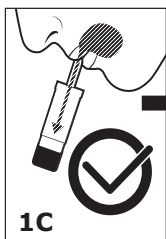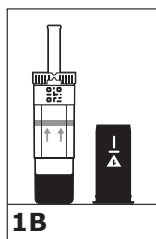

1B Retirez le capuchon gris et mettez-le de côté, ne le jetez pas !



1C Tenez le SalivaPOD en position verticale. Recueillez la salive à l'avant de votre bouche et pressez lentement la salive dans l'embout blanc.

1D Répétez plusieurs fois jusqu'à ce que le liquide salivaire atteigne la ligne (1D). Vérifiez la trace de la salive liquide dans le tube intérieur entre chaque remplissage. Un bon éclairage aide à la visibilité.

1E Évitez la présence d'air et de bulles, ne soufflez pas ! Aspirez légèrement la mousse au sommet du cylindre intérieur (1E), ou mettez le test de côté pendant un court instant avant de recommencer.

1F IMPORTANT! Si une quantité trop importante de salive a pénétré dans le compartiment, retirez-la pour éviter tout débordement. Remplacez le capuchon sur l'embout buccal, la flèche étant orientée vers le repère. Appuyez fortement sur le capuchon jusqu'à ce qu'il se bloque (1G).

1G Complétez la déclaration dans l'application ou collez enfin l'étiquette papier avec vos indications écrites à la main sur le SalivaPOD (ou le tube à essai, APRÈS avoir effectué les étapes de la page 2). Soumettez l'échantillon OU passez à la page 2 si vous avez reçu un tube à essai, une lingette désinfectante et/ou un sac.

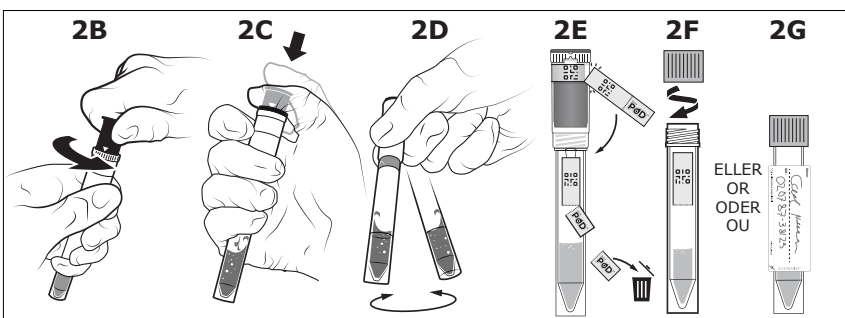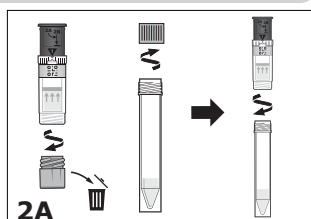

2A Dévissez les deux capuchons. Conservez le capuchon du tube à essai. Il sera réutilisé. Assemblez le tube à essai sur le fond du SalivaPOD™.

2B Tournez le capuchon d'environ 1 cm dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

2C Appuyez sur le capuchon jusqu'au fond du récipient.

2D Faites pivoter le tube à essai pour en mélanger le contenu.

2E Si vous utilisez le code QR: Déchirez l'une des étiquettes QR et placez-la sur le tube à essai. Terminez en déchirant la section du logo. Si le code QR est endommagé, utilisez le code de rechange.

2F Dévissez le SalivaPOD™ du tube à essai et vissez fermement le capuchon rouge sur le tube à essai.

2G Si vous utilisez l'étiquette en papier, celle-ci doit être collée dans le sens de la longueur sur le tube à essai APRÈS désinfection(2H).

2H Si vous avez reçu une lingette désinfectante et/ou un sac: Nettoyez le tube à essai à l'aide de la lingette désinfectante AVANT DE POSITIONNER L'ÉTIQUETTE EN PAPIER ÉCRIT À LA MAIN (1A-II), mettez le tube à essai une fois étiqueté dans le sac puis fermez le sac.

2I Si vous avez reçu un sac: Nettoyez le tube à essai à l'aide de la lingette désinfectante AVANT DE POSITIONNER L'ÉTIQUETTE EN PAPIER ÉCRIT À LA MAIN (1A-II), mettez le tube à essai une fois étiqueté dans le sac puis fermez le sac.